

BaByliss®

PARIS

le plus
sûr

le plus
facile

le plus
rapide



LA SOLUTION ÉPILATION DES PROFESSIONNELS

1. Avant de commencer

- 1.1. La solution épilation des professionnels à domicile
- 1.2. Description de l'appareil HPL
- 1.3. Contenu du paquet
- 1.4. La lampe flash remplaçable

2. Utilisation prévue de votre appareil HPL

3. La sécurité avec l'épilateur HPL

4. Contre-indications

5. Dans quels cas ne doit-on pas utiliser l'appareil HPL

6. Précautions – Comment utiliser votre appareil HPL en toute sécurité?

7. Réduire les risques de blessures

8. Effets secondaires éventuels avec l'épilateur HPL

9. La méthode d'épilation définitive avec l'épilateur HPL

- 9.1. Comment la lumière parvient-elle à éliminer le poil
- 9.2. Quel est l'impact du cycle de croissance du poil sur la photoépilation
- 9.3. Optimiser les résultats en planifiant vos séances d'épilation par HPL

10. Premiers pas avec votre épilateur HPL

- 10.1. Installation de votre appareil HPL
- 10.2. La première séance par votre épilateur HPL
- 10.3. À quoi faut-il s'attendre avec l'épilateur HPL
- 10.4. Après le traitement avec votre épilateur HPL

11. Maintenance de votre appareil HPL

- 11.1. Nettoyage de l'épilateur HPL
- 11.2. Changement de la lampe flash remplaçable

12. Dépannage

- 12.1. Mon épilateur HPL ne démarre pas
- 12.2. Il n'y a pas d'impulsion lorsque j'appuie sur le déclencheur

13. Service client

14. Foire aux questions

15. Spécifications

16. Emballage

Avant d'utiliser l'épilateur HPL pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez particulièrement attention aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel d'utilisation avant chaque utilisation de votre épilateur HPL.



L'épilateur HPL est un appareil puissant et pour des raisons de sécurité, il doit être utilisé avec certaines précautions.

Veuillez lire tous les avis et avertissements de sécurité avant usage et veiller à leur stricte application pendant l'utilisation de l'épilateur HPL.

1. Avant de commencer

1.1. La solution épilation des professionnels à domicile

Depuis plus de 30 ans, BaByliss se place à la pointe de la technologie pour répondre aux aspirations de plus en plus exigeantes et pointues des femmes en matière d'épilation. Grâce à la technique d'épilation par lumière pulsée, l'épilateur HPL (Home Pulsed Light) de BaByliss va vous permettre d'éliminer en douceur et sans douleur les poils indésirables pour une peau durablement lisse et soyeuse.

Ce procédé exclusif d'épilation produit une lumière qui, pulsée puis absorbée par la mélanine (pigment présent dans le poil), est acheminée vers le bulbe et transformée en chaleur. Cet effet thermique entraîne la destruction sans douleur du poil et de sa racine et prévient sa repousse. Cette technologie exclusive et brevetée apporte une solution longue durée, prouvée scientifiquement, qui permet d'obtenir rapidement des résultats permanents.


L'épilateur HPL de BaByliss garantit un traitement indolore sur toutes les zones du corps et dispose d'un système de sécurité unique grâce à son détecteur de couleur de peau.

L'épilateur HPL de BaByliss offre une épilation permanente digne d'un professionnel associée à l'intimité et au confort d'un traitement à domicile.

1.2. Description de l'appareil HPL

L'épilateur HPL est un appareil de photoépilation définitive qui s'utilise à domicile.

Votre appareil HPL comprend une BASE sur laquelle se trouve un PANNEAU DE COMMANDE et un APPLICATEUR muni d'une LAMPE FLASH. Sur l'APPLICATEUR se trouve un DECLENCHEUR. La LAMPE FLASH se situe sur l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR.

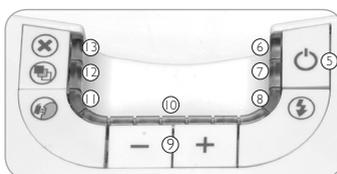

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---|--|
| ① BASE DE L'APPAREIL | ⑤ INTERRUPTEUR ON/STAND BY | ② SÉLECTEURS D'INTENSITÉ DE PUISSANCE | ③ TEMOIN LUMINEUX INDICATEUR DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL |
| ② PANNEAU DE COMMANDE | ⑥ TEMOIN LUMINEUX STAND BY | ④ TEMOINS LUMINEUX INDICATEURS DE PUISSANCE | ④ DECLENCHEUR |
| ③ APPLICATEUR | ⑦ TEMOIN LUMINEUX ON | ⑤ TEMOINS LUMINEUX INDICATEURS DE L'UTILISATION DE LA LAMPE FLASH | ⑤ LAMPE FLASH |
| ④ LAMPE FLASH REMPLAÇABLE | ⑧ TEMOIN LUMINEUX READY | ⑥ TEMOIN LUMINEUX DÉTECTEUR DE COULEUR DE PEAU | ⑥ EMBOUT DE L'APPLICATEUR |

1.3. Contenu du paquet

Voici ce que vous trouverez dans le contenu du paquet contenant votre épilateur HPL :

- Une BASE HPL de BaByliss et son APPLICATEUR
- Un cordon d'alimentation
- Le manuel d'utilisation
- Un DVD d'accompagnement.

1.4. La lampe flash remplaçable

La *LAMPE FLASH* de l'épilateur HPL a une capacité de 750 impulsions (peu importe le niveau d'intensité). On considère que sur une personne de taille moyenne, les 750 impulsions de la lampe couvrent les jambes, les bras, les aisselles et la ligne bikini en UNE séance; les jambes, les aisselles en DEUX séances et enfin, les aisselles et la ligne bikini en DIX séances. Selon la région du corps qui sera traitée, vous aurez besoin d'une à sept *LAMPES FLASH REMPLAÇABLES* au cours de la première année d'utilisation de votre appareil HPL.

2. Utilisation prévue de votre appareil HPL

L'épilateur HPL est conçu pour éliminer les poils indésirables.

L'épilateur HPL est un appareil d'épilation qui sert à éliminer les poils indésirables du corps, notamment dans les régions suivantes : les aisselles, la ligne bikini, les jambes et les bras.

3. La sécurité avec l'épilateur HPL

La sécurité est prioritaire avec l'épilateur HPL

- **La technologie HPL offre un maximum de sécurité et un minimum de risques**
L'épilation par la technologie Home Pulsed Light permet d'obtenir des résultats permanents avec une intensité de puissance moindre comparée à d'autres méthodes de photoépilation. La faible énergie utilisée par l'épilateur HPL réduit les probabilités de blessures ou de complications et contribue à votre sécurité générale.
- **L'épilateur HPL est conçu avec un dispositif de protection.** L'appareil d'épilation HPL de BaByliss ne convient pas aux personnes dont la peau est naturellement foncée ou bronzée. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité, un capteur qui vérifie la pigmentation de la peau traitée et détecte celle qu'il juge compatible. Ce procédé exclusif de sécurité ne vous permettra pas de traiter les endroits où la peau est trop foncée ou trop bronzée. De plus, la lentille optique par laquelle l'impulsion d'énergie est émise et qui représente une surface de 2X3cm² est encastrée dans la *LAMPE FLASH* dans l'*EMBOUT DE L'APPLICATEUR*. Voilà qui vous assure une protection optimale en évitant le contact direct de la peau avec la lentille optique.
- **L'épilateur HPL possède un dispositif de protection pour les yeux**
L'*APPLICATEUR* de l'épilateur HPL est conçu avec un dispositif intégré qui sert à protéger les yeux. Ce dernier a été conçu de manière à ce que l'impulsion ne puisse être émise si l'*APPLICATEUR* est dirigé dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque l'*EMBOUT DE L'APPLICATEUR* est en contact avec la peau. Veillez à ne pas regarder la zone traitée pendant le flash.

4. Contre-indications

Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi

L'usage de l'épilateur HPL ne convient pas à tous. Avant de l'utiliser, veuillez lire les directives suivantes. Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet sur www.babyliss.com ou le site internet du distributeur dans votre région.

Enfin, en cas de doute quant à l'utilisation personnelle de l'épilateur HPL, veuillez consulter votre dermatologue ou votre médecin traitant.

- **NE PAS UTILISER l'épilateur HPL sur la peau naturellement foncée.**

L'épilateur HPL vous débarrasse des poils indésirables en s'attaquant de façon sélective aux pigments dans la tige du poil. Toutes sortes de pigments existent dans les tissus environnants de la peau. La quantité de pigments de la peau d'une personne en détermine la couleur, mais également le niveau de risque auquel elle s'expose lorsqu'elle utilise une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.

Le traitement de la peau foncée avec l'épilateur HPL peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau (hyper ou hypo-pigmentation).

L'épilateur HPL a été conçu avec un capteur détecteur de couleur qui vérifie la couleur de la peau traitée au début de chaque séance et de temps en temps en cours d'utilisation. Ce capteur a pour fonction de vérifier que l'énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent.



N'UTILISEZ PAS l'appareil HPL sur la peau naturellement foncée!
Il ne fonctionnera pas!
Consultez la charte des couleurs située sous le couvercle.

- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil HPL sur une peau bronzée ou après une récente exposition au soleil!

Utiliser l'appareil HPL sur une peau récemment exposée au soleil peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de carnation (hyper ou hypo-pigmentation).



N'UTILISEZ PAS l'appareil HPL sur une peau bronzée ou après une récente exposition au soleil ! Un tel usage peut causer des brûlures graves ou des dommages sévères à la peau. Évitez de vous exposer aux rayons du soleil pendant les 4 semaines qui précèdent un traitement avec l'épilateur HPL.

- **Garder loin des yeux!**

L'application de l'impulsion de l'épilateur HPL BaByliss sur les yeux peut provoquer des lésions oculaires graves.



Garder loin des yeux!

- **REMARQUE** : L'appareil HPL n'est pas efficace contre les poils clairs.

L'appareil HPL n'est pas efficace contre les poils blancs, gris ou blonds. Si vos poils sont de l'une de ces couleurs, il se peut que l'appareil HPL ne vous convienne pas.

5. Dans quels cas ne doit-on pas utiliser l'appareil HPL?

L'utilisation de l'épilateur HPL est contre-indiquée temporairement sous certaines conditions. N'UTILISEZ PAS l'appareil HPL dans au moins un des cas suivants :

- Grossesse ou allaitement.
- Forte exposition au soleil ou à une machine UV au cours des 28 derniers jours.
- Tatouage ou maquillage permanent sur la zone à traiter.
- État anormal de la peau dans la région à traiter : Taches brunes ou noires, grosses taches de rousseur; taches de naissance, verrues ou naevus pigmentés.
- Eczéma, psoriasis, lésions, plaies ouvertes ou infection évolutive dans la région à traiter. Il faut attendre que la région affectée soit guérie avant d'utiliser l'appareil HPL.
- Antécédents de formation de chéloïdes, une sensibilité connue à la lumière (photosensibilité) ou causée par des médicaments, y compris la prise de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (p.ex. : aspirines, ibuprofène, acétaminophène), tétracyclines, phénothiazines, thiazide, diurétiques, sulfonylurées, sulfamides, DTIC, fluorouracile, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxy, Acides (AHAs), Acides Beta-Hydroxy (ABHs), Retin-A®, Accutane® ou rétinoïdes topiques.
- Traitement récent ou en cours à base d'alpha-hydroxyacides (AHA), de bêta-hydroxyacides (BHA), de Retin-A®, de rétinoïdes topiques ou d'acide azelaïque.
- État anormal de la peau causé par un diabète, par exemple, ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.
- Traitement à base d'Accutane® (isotrétinoïne) au cours des 6 derniers mois.
- Régime à base de stéroïdes au cours des 3 derniers mois.
- Antécédent de poussée d'herpès sur la zone à traiter; à moins d'avoir consulté un médecin et reçu un traitement préventif avant d'utiliser l'épilateur HPL.
- Épilepsie.
- Implant actif, tel qu'un stimulateur cardiaque, un implant pour incontinence urinaire, une pompe à insuline, etc.
- Pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.
- Antécédent de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermatiques.
- Radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.
- Si vous avez le moindre doute concernant les risques présentés pour vous au sujet de l'utilisation de l'appareil HPL, consultez votre médecin traitant ou votre dermatologue.

6. Précautions – Comment utiliser votre appareil HPL en toute sécurité?

Une première séance d'essais (quelques flashes) sur le bras ou la jambe doit être faite à l'intensité minimale pour vérifier que votre peau supporte correctement le traitement dans les jours qui suivent.

Vous pourrez ensuite graduellement augmenter la puissance au cours des séances suivantes.

■ Choisissez le niveau d'intensité de puissance avec PRUDENCE!

Le niveau d'intensité désigne la puissance de la lumière pulsée projetée sur votre peau durant le traitement, allant du niveau le plus faible (-) au plus élevé (+). Les **TEMOINS LUMINEUX INDICATEURS DE PUISSANCE** sur le **PANNEAU DE COMMANDE** indiquent le niveau d'intensité sélectionné. En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (voir « Effets secondaires éventuels » plus bas).

La première fois que vous utilisez votre appareil, utilisez toujours la puissance minimale (un témoin lumineux à « - »).

N'augmentez la puissance à la prochaine séance que si vous avez ressenti aucun, sinon un léger, désagrément lors de votre première séance ou après, alors que votre appareil était réglé à la puissance minimale. À la séance suivante, augmentez la puissance, un cran à la fois, à un témoin lumineux supérieur d'intensité, et ainsi de suite pour les séances suivantes.

Pour des instructions détaillées sur la sélection de la puissance, voir l'encadré « Niveau d'intensité de puissance » du paragraphe « La première séance avec l'épilateur HPL ».

■ Évitez les effets secondaires!

Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance!

Évitez de superposer les impulsions!

Si des brûlures ou des cloques apparaissent, **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT!**

■ Évitez les complications après l'utilisation de l'épilateur HPL!

N'exposez pas les zones traitées au soleil.

“Exposition aux rayons du soleil” signifie une exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d'une quinzaine de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects pendant une heure continue.

Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire d'indice de protection 30 ou plus, durant toute la période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'épilation.

Veillez toujours raser la région à traiter et assurez-vous d'avoir la peau propre avant d'utiliser votre appareil HPL.

Veillez couvrir les marques de naissance et les tatouages pendant le traitement par l'épilateur HPL et couvrir également les taches brunes ou noires, ainsi que les taches de rousseur, les taches de naissances, les verrues ou les excroissances avant d'utiliser l'épilateur HPL.

- Ne regardez jamais directement la lumière provenant de l'**APPLICATEUR** et de la **LAMPE FLASH REMPLAÇABLE**.
- N'utilisez pas l'épilateur HPL sur le bout des seins et les organes génitaux (homme ou femme).
- N'utilisez pas l'épilateur HPL sur toute partie du corps où vous pourriez vouloir une pilosité ultérieurement.
- N'utilisez pas l'épilateur HPL à d'autres fins que l'épilation.
- Ne pointez jamais l'**APPLICATEUR** de l'épilateur HPL pour émettre une impulsion de lumière dans un espace ouvert. Assurez-vous toujours de diriger l'**APPLICATEUR** vers la peau et que ce dernier soit entièrement en contact avec elle avant de libérer une impulsion.
- Éloignez l'**APPLICATEUR** de l'épilateur HPL de la peau si la peau ou l'**APPLICATEUR** sont trop chauds.
- N'utilisez jamais de liquides inflammables, comme de l'alcool (y compris parfum, désodorisant ou toute autre composition contenant de l'alcool) ou de l'acétone pour nettoyer la peau avant usage de l'épilateur HPL.
- L'utilisation de votre appareil HPL peut causer un changement passager de pigmentation (Voir plus bas, « Effets secondaires éventuels »).
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. N'utilisez pas l'épilateur HPL sur des enfants et n'autorisez pas les enfants à l'utiliser.

7. Réduire les risques de blessures

Comme avec tout appareil électrique, certaines précautions sont nécessaires afin d'assurer votre sécurité lorsque vous utilisez l'épilateur HPL.

- Éloignez l'épilateur HPL de toute source d'eau !
- L'épilateur HPL est un appareil électrique et ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau.
- Ne rangez pas l'épilateur HPL dans un endroit d'où il risquerait de tomber ou de se retrouver dans une baignoire ou un lavabo ou tout autre endroit contenant du liquide. Ne le placez pas dans l'eau ou tout autre liquide. Cela provoquerait une grave électrocution.
- N'utilisez pas votre épilateur HPL durant votre bain.
- N'utilisez pas l'appareil HPL s'il est humide ou mouillé.
- Ne rattrapez pas l'épilateur HPL s'il est tombé à l'eau.
- Débranchez immédiatement l'appareil HPL s'il est tombé à l'eau.



Éloignez l'épilateur HPL de toute source d'eau!

- N'ouvrez jamais votre appareil HPL!
- N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre appareil HPL. Ouvrir l'appareil vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.



N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre épilateur HPL.
Seuls les centres de réparation agréés par BaByliss sont habilités à effectuer des réparations.

- Essayer d'ouvrir l'épilateur HPL comporte également des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie.
- Veuillez contacter le service client de votre épilateur HPL si votre appareil est cassé, endommagé ou nécessite une réparation.
- Utilisez l'épilateur HPL uniquement pour l'usage prévu et en respectant les instructions du présent manuel.
- Votre appareil ne doit jamais rester branché sans surveillance.
- Ne laissez jamais votre épilateur HPL allumé sans surveillance.
- Ne branchez pas l'épilateur HPL si le cordon ou la prise sont endommagés. Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.
- N'utilisez pas votre appareil HPL si vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il est en état de marche.
- N'utilisez pas votre épilateur HPL si vous constatez une défectuosité ou un bris.
- N'utilisez pas votre épilateur HPL si la ventilation de l'applicateur est fendillée, si elle se détache de la pièce à main ou si elle est manquante.
- N'utilisez pas votre épilateur HPL si le capteur qui vérifie la couleur de peau est fendillé ou brisé sur l'APPLICATEUR.
- N'utilisez pas votre épilateur HPL si la coquille de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.
- N'utilisez pas votre épilateur HPL avec une LAMPE FLASH en mauvais état ou la LENTILLE OPTIQUE fendillée, brisée ou manquante.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation de l'appareil HPL de la prise électrique murale immédiatement après usage.
- Débranchez votre appareil HPL lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de composants avec votre appareil HPL n'ayant pas été recommandés par BaByliss.

8. Effets secondaires éventuels avec l'épilateur HPL

Lorsque votre épilateur HPL est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications sont rares. Cependant, tout traitement cosmétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte certains risques. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre et d'accepter ces risques et les complications éventuelles lorsque vous utilisez un système d'épilation à lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

En cas de superposition ou administration répétée des impulsions sur la même zone:

Effets secondaires	Manifestation de l'effet secondaire
Léger inconfort / désagrément de la peau	Léger
Rougeur	Léger
Hypersensibilité de la peau	Léger
Brûlures ou plaies	Rare
Cicatrice	Rare
Changement de la pigmentation	Rare
Rougeur excessive de la peau et enflure	Rare
Infection	Négligeable
Ecchymose	Négligeable

■ Sensation cutanée d'un léger désagrément

Même si l'épilation à lumière pulsée à domicile est généralement très bien tolérée, la plupart des personnes qui l'utilisent ressentent un léger désagrément durant l'utilisation, souvent décrit comme une sensation de picotements sur la zone traitée. En général, cette sensation dure le temps de l'application, voire pendant les quelques minutes qui suivent. Tout inconfort au-delà de ce désagrément est anormal et signifie que vous devriez, soit arrêter le traitement, car vous ne le tolérez pas, soit que la puissance sélectionnée est trop élevée.

■ Rougeur

Votre peau peut rougir juste après l'utilisation de l'épilateur HPL ou dans les 24 heures qui suivent. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.

■ Hypersensibilité de la peau

La peau est plus sensible sur la zone traitée et pourrait s'assécher et s'écailler.

■ Brûlures ou plaies

Très rarement, la peau peut être exposée à des blessures ou des brûlures suite à l'application. Plusieurs semaines peuvent être nécessaires pour une guérison totale et, dans des cas exceptionnels, une cicatrice peut subsister.

■ Cicatrice

Même si ces cas sont très rares, des cicatrices permanentes peuvent apparaître. Généralement, les cicatrices prennent la forme d'une lésion superficielle de coloration blanchâtre (hypotrophique). Toutefois, la cicatrice peut être large et rouge (hypertrophique) ou large et étendue au-delà de la zone blessée (chéloïde). Des traitements esthétiques plus poussés peuvent être requis pour en améliorer l'apparence.

■ Changement de la pigmentation

L'appareil HPL vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchissement) de la peau alentour. Le risque de changement de pigmentation est plus élevé chez les personnes à la peau foncée.

Généralement, le changement de pigmentation et la décoloration sont temporaires. Les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.

- **Rougeur excessive et enflure/gonflement**

Dans quelques rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonflée. Cette réaction est plus fréquente sur les parties sensibles du corps. La rougeur et le gonflement devraient disparaître sous 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au soleil.

- **Infection**


Une infection cutanée est extrêmement rare, mais peut survenir après une brûlure ou une lésion de la peau provoquée par l'épilateur HPL.

- **Echymose**


Très rarement, l'utilisation de l'épilateur HPL peut provoquer une ecchymose bleu mauve pouvant perdurer de 5 à 10 jours. À mesure que le bleu disparaît, la peau peut prendre une coloration rouille (hyperpigmentation) pouvant être permanente.

9. La méthode d'épilation définitive avec l'épilateur HPL


L'épilateur HPL est un appareil personnel de photoépilation permanente. Le procédé de l'épilation laser ou photoépilation est bien connu et maîtrisé. Il a été testé en clinique partout dans le monde durant plus de 15 ans et a prouvé son efficacité et sa sécurité pour offrir graduellement une épilation permanente.

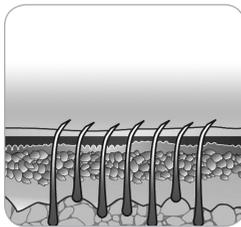


Pendant l'application de l'épilateur HPL

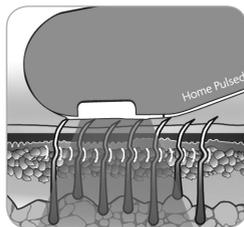


Durant l'impulsion émise de l'épilateur HPL

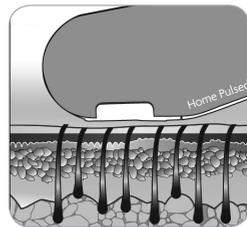


Après l'application de l'épilateur HPL

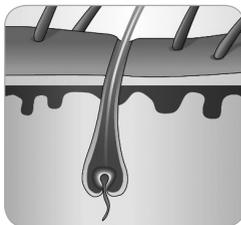

Phase de croissance du poil - Anagène

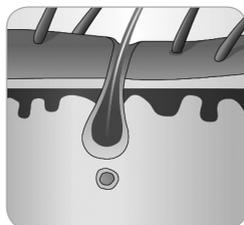

Phase de transition - Catagène

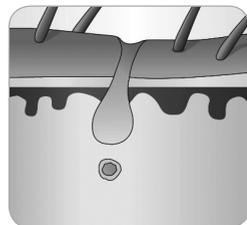

Phase de repos/dormance - Téloène

9.1. Comment la lumière parvient-elle à éliminer le poil?


La photoépilation est basée sur la théorie de la photothermolyse sélective utilisant l'énergie optique pour arrêter la croissance du poil. Afin d'obtenir de tels effets thermiques, la racine du poil doit absorber de manière sélective la photoénergie et la transformer en chaleur. Cette sélection se produit lorsque l'énergie optique émise est absorbée en majorité par le pigment du bulbe, alors que la peau et les tissus alentour restent froids.

La mélanine est le pigment se trouvant dans le bulbe pileux, responsable de l'absorption de la lumière, générant la chaleur qui provoque l'arrêt de la croissance pileuse. Aussi, plus le poil contient de mélanine (c.-à-d. plus le poil est foncé), plus il peut absorber de lumière et plus la photoépilation devient efficace.

9.2. Quel est l'impact du cycle de croissance du poil sur la photoépilation?

Chaque poil de notre corps passe par trois phases de pousse : les phases anagène, catagène et télogène. Ces trois phases jouent un rôle important dans le processus de photoépilation. La phase anagène est la phase de croissance du poil, alors que les phases catagène et télogène sont toutes deux des phases de repos. Le temps que prend un poil pour passer à travers son cycle pileux au complet varie d'une personne à l'autre, ainsi que de la région du corps où il se trouve. On peut toutefois établir une moyenne entre 18 mois et 24 mois.

La majorité des follicules pileux se trouvent à un moment donné dans une des deux phases de repos. Par conséquent, l'épilateur HPL n'aura aucun effet sur les poils quand ils seront dans ces phases de repos. En revanche il agira sur les poils en phase anagène. Il est donc important de comprendre la durée d'un cycle pileux complet pour obtenir des résultats définitifs avec votre appareil HPL.

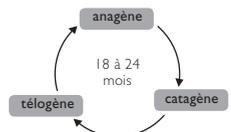

9.3. Optimiser les résultats en planifiant vos séances d'épilation par HPL

Un cycle pileaire complet prend en moyenne de 18 et 24 mois durant lesquels de nombreuses séances avec votre épilateur HPL seront nécessaires pour obtenir des résultats permanents. L'efficacité de l'appareil varie d'une personne à l'autre et en fonction de la région traitée, de la couleur des poils et de la manière dont l'appareil est utilisé.

Planification de vos séances d'épilation par l'épilateur HPL durant un cycle pileaire complet :

- Les 3 ou 4 premières séances avec l'épilateur HPL doivent être espacées de 2 semaines.
- Les séances 5 à 7 doivent être espacées de 4 semaines.
- Ensuite, vous utiliserez l'épilateur HPL occasionnellement selon vos besoins jusqu'à obtenir une épilation permanente.

Vous pourrez planifier vos séances personnelles à votre rythme et obtenir quand même des résultats satisfaisants. Par contre, nous vous recommandons de suivre ce calendrier, car il a donné d'excellents résultats. À noter : Traiter la même zone plus d'une fois en deux semaines ne donne pas de meilleurs résultats et risque de provoquer des effets indésirables.

Vous pourriez planifier des séances d'épilation de maintien avec votre épilateur HPL après avoir atteint vos objectifs :

En raison des facteurs hormonaux et des changements physiologiques, les follicules au repos peuvent devenir actifs. Des séances de maintien pourront donc éventuellement être nécessaires à l'occasion.

Résultats escomptés de l'épilation

Types de peau selon Fitzpatrick	Couleur de la peau	Fluence optique [J / cm ²]	Surface de la région de traitement	Nombre de séances en moyenne	Efficacité (% de l'épilation/repousse)
I - IV	Brun moyen à brun	3 - 4,5	Jambe ou cuisse	10 à 12	60% de diminution de la pilosité
			Bras		50% de diminution de la pilosité
			Ligne bikini		60% de diminution de la pilosité
			Aisselles		55% de diminution de la pilosité
I - IV	Brun à noir	3 - 4,5	Jambe ou cuisse	8 à 10	70% de diminution de la pilosité
			Bras		60% de diminution de la pilosité
			Ligne bikini		70% de diminution de la pilosité
			Aisselles		65% de diminution de la pilosité

Le résultat varie d'une personne à l'autre selon le type de poil et les facteurs biologiques pouvant déterminer le cycle de pousse du poil. Certaines personnes obtiendront des résultats plus ou moins rapidement que le nombre moyen de séances que nous recommandons.

On ne peut pas s'attendre à des résultats définitifs en une ou deux séances. Là encore, la durée du cycle de repos des follicules pileux varie d'une région à l'autre du corps.

10. Premiers pas avec votre épilateur HPL

10.1. Installation de votre appareil HPL

- Sortez de la boîte la *BASE*, l'*APPLICATEUR* et les autres composants de l'épilateur HPL.
- Vérifiez que la *LAMPE FLASH* soit correctement insérée dans l'*APPLICATEUR*.
- Branchez le cordon d'alimentation dans l'emplacement prévu à cet effet situé sur la *BASE* de l'épilateur HPL.
- Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à la prise murale. Le *TEMPOIN LUMINEUX* « *STAND BY* » s'allume.

Votre épilateur HPL est prêt à être utilisé.



10.2. La première séance avec votre épilateur HPL

Une première séance d'essai sur le bras ou la jambe doit être faite à l'intensité minimale pour vérifier que votre peau supporte correctement le traitement dans les jours qui suivent.

Vous pourrez ensuite graduellement augmenter la puissance au cours des séances suivantes.

L'appareil est paramétré pour émettre les 50 premières impulsions à la puissance minimale et les 200 impulsions suivantes jusqu'à la puissance 3. Nous vous recommandons de respecter ces étapes.

Pour utiliser les niveaux de puissances 2 à 5 plus rapidement, l'appareil doit être déverrouillé. Pour cela, allumez-le et appuyez simultanément sur les touches + et - pendant plusieurs secondes, jusqu'à entendre deux bips consécutifs.

Le niveau de puissance pourra être réglé par les touches + et -.

Votre peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant.

5. Appuyez sur l'*INTERRUPTEUR*. Le *TEMPOIN LUMINEUX INDICATEUR DE PUISSANCE* s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).

6. Environ 4 secondes après avoir appuyé sur l'*INTERRUPTEUR*, le *TEMPOIN LUMINEUX* « *READY* » s'allumera et l'appareil émettra un « bip » sonore indiquant que l'appareil est prêt à libérer une impulsion d'intensité minimale. L'appareil est positionné par défaut sur la puissance minimale.

7. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le **SÉLECTEUR DE PUISSANCE** à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que le **TEMOIN LUMINEUX INDICATEUR DU NIVEAU DE PUISSANCE** désiré s'allume. Le **TEMOIN LUMINEUX INDICATEUR DE NIVEAU DE PUISSANCE** qui est allumé correspond au niveau de puissance administrée (voir détails sur le « Niveau d'intensité de puissance »).
8. Placez l'**APPLICATEUR** sur la peau en pressant fermement l'**EMBOUT DE L'APPLICATEUR** pour le faire adhérer également à toute la surface de traitement.
9. Appuyez sur le **DECLENCHEUR**. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau.
Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion dans la peau. Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Il se peut que vous ressentiez une légère sensation de chaleur et des picotements.

Si vous ne voyez aucune lumière et que le **TEMOIN LUMINEUX INDICATEUR** du capteur détecteur de couleur se met à clignoter pendant 3 secondes, cela signifie que la peau est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de l'épilateur HPL (voir détails : « Le capteur de couleur de peau »).

Votre appareil HPL se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 4 secondes, le **TEMOIN LUMINEUX INDICATEUR READY** s'allumera et vous entendrez à nouveau un « bip ».

10. Enlevez l'**EMBOUT DE L'APPLICATEUR** de la zone de traitement.
11. Déplacez l'**EMBOUT DE L'APPLICATEUR** sur une autre région à traiter: Les traces de la pression de l'applicateur faites sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer des impulsions ou de les diffuser trop à proximité les unes des autres. (voir « Couvrir la zone de traitement »).

Avvertissement: Ne pas traiter la même région de peau plus d'une fois par séance d'épilation! Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

12. Répétez l'application à partir de l'étape 5.

Niveau d'intensité de puissance

Le niveau d'intensité de puissance détermine la puissance de la lumière pulsée administrée dans la peau durant le traitement, allant du niveau le plus bas (-) au plus haut (+). Les **TEMOINS LUMINEUX INDICATEURS DE PUISSANCE** correspondants sur le **PANNEAU DE COMMANDE** indiquent le niveau de puissance sélectionné. En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (cf. « Effets secondaires éventuels » plus bas).

Utilisez toujours la puissance minimale (un témoin lumineux à « - ») pour votre première utilisation de votre épilateur HPL. Si au cours de votre première séance d'épilation ou après, vous ressentez peu ou aucun désagrément, vous pourrez essayer, à votre prochaine séance, d'augmenter d'un cran le niveau de puissance dont vous verrez s'allumer le **TEMOIN LUMINEUX INDICATEUR** correspondant, et ainsi de suite.



N'augmentez pas la puissance si vous avez ressenti plus d'inconfort que d'habitude ou après avoir utilisé l'appareil (voir « les effets secondaires éventuels »).

N'augmentez pas l'intensité de puissance au cours d'une séance si vous n'avez pas ressenti d'inconfort. Il est possible que vous n'en ressentiez pas pendant le traitement, mais après.

Lorsque votre appareil est en état de marche, son niveau d'intensité sera automatiquement positionné par défaut à l'intensité la plus faible. Un seul **TEMOIN LUMINEUX INDICATEUR DE PUISSANCE** sera allumé. Afin de régler la lumière à l'intensité désirée, soit plus élevée ou plus faible, appuyez sur le **SÉLECTEUR DE PUISSANCE** à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que le **TEMOIN LUMINEUX CORRESPONDANT** à l'intensité que vous voulez s'allume.

Lors de votre première utilisation de l'épilateur HPL et pour votre sécurité, le système est paramétré par défaut pour émettre les 50 premières impulsions à la puissance minimale et les 200 impulsions suivantes jusqu'à la puissance 3.

Pour annuler ces paramètres de sécurité, pressez simultanément les touches « + » et « - » du **SÉLECTEUR** et maintenez-les appuyées jusqu'à entendre 2 « bips » consécutifs.

Pour restaurer ces paramètres de sécurité, pressez simultanément les touches « + » et « - » du **SÉLECTEUR DE PUISSANCE** et maintenez-les appuyées jusqu'à entendre 3 « bips » consécutifs.

Le capteur de couleur de peau

L'épilation qui repose sur la lumière pulsée ne convient pas à la peau naturellement foncée et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlure, phlyctène et décoloration de la peau (hyper ou hypopigmentation). Pour éviter une utilisation inappropriée, l'appareil est muni d'un procédé exclusif de sécurité, un capteur de couleur, qui permet de vérifier la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Si le capteur détecte que la peau est trop foncée, l'appareil ne pourra plus émettre d'impulsion lumineuse. Par conséquent, si vous constatez que vous ne pouvez plus émettre d'impulsion et que le *TEMPOIN LUMINEUX DU CAPTEUR DE COULEUR* clignote pendant 3 secondes, alors la couleur de peau est trop foncée pour une application sécuritaire. Faites un essai à un autre endroit ou contactez une personne-ressource du Centre de Service BaByliss.

Couvrir la zone de traitement

Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone.



L'*EMBOUT DE L'APPLICATEUR* est conçu pour laisser une légère marque temporaire quand il est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'applicateur correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.



Éviter de superposer des impulsions!

Ne pas traiter la même zone plus d'une fois par séance!



ARRÊTER IMMÉDIATEMENT le traitement si la peau présente une brûlure ou phlyctène!

10.3. À quoi faut-il s'attendre avec l'épilateur HPL?

Il se peut que l'utilisation à domicile de l'épilateur HPL représente pour bon nombre de personnes une nouvelle expérience en matière d'épilation par la lumière. L'épilateur HPL est facile à manier et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit de ventilateur** – Le ventilateur de refroidissement de l'épilateur HPL fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Cela est normal.
- **Bip à chaque impulsion** - À l'activation d'une impulsion de l'épilateur HPL, un léger bruit accompagne le flash lumineux.
- **Pression modérée de L'APPLICATEUR** – nécessaire et utile pour le positionner correctement sur la zone connexe; c'est une exclusivité du dispositif de sécurité de l'épilateur HPL.
- **Sensation de chaleur et picotements** – Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et des picotements résultant de l'énergie de la lumière.
- N'oubliez pas qu'il est important d'utiliser les puissances minimales pour les premières séances. La sensation de chaleur peut perdurer jusqu'à une heure après votre séance d'épilation.
- **Peau légèrement rougie ou rosie** – Juste après l'utilisation ou dans les 24 heures suivantes, il n'est pas rare de voir que la peau est légèrement rougie ou rosée, notamment autour des poils. Si des rougeurs évidentes, des cloques ou brûlures apparaissent, arrêtez l'utilisation de l'épilateur HPL immédiatement.

10.4. Après le traitement avec votre épilateur HPL

- A la fin de votre séance avec votre épilateur HPL, éteignez votre appareil à l'aide de l'*INTERRUPTEUR ON/OFF*. (Assurez-vous de retenir le dernier niveau de puissance utilisé, car il ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez votre appareil).
- Débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
- Nous vous recommandons de nettoyer votre épilateur HPL après chaque séance, en particulier l'*APPLICATEUR* (voir « Nettoyage de l'épilateur HPL »).
- Après le nettoyage de votre appareil, nous vous recommandons de le ranger dans sa boîte et de le tenir éloigné de toute source d'eau.



Soins de la peau après votre séance d'épilation

N'exposez pas au soleil les zones traitées. Protégez votre peau avec de l'écran solaire tout au long du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'utilisation de votre appareil HPL.



Effets secondaires et complications

Certaines patientes peuvent subir une altération de leur pigmentation suite au traitement avec l'épilateur HPL. Ces effets, lorsqu'ils apparaissent, sont généralement légers et passagers.

En cas de complication (voir « Effets secondaires éventuels ») **contactez votre médecin traitant immédiatement.**

11. Maintenance de votre appareil HPL

11.1. Nettoyage de l'épilateur HPL

Nous vous recommandons de nettoyer votre épilateur HPL après chaque séance, en particulier l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon sec et propre et un nettoyant conçu pour nettoyer l'équipement électronique en particulier l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR.

Ne trempez jamais votre appareil HPL ou l'un de ses composants dans l'eau !

11.2. Changement de la lampe flash remplaçable

L'intensité de l'impulsion est définie par la puissance sélectionnée. Il n'y a pas de baisse d'énergie dans la durée de vie d'une LAMPE FLASH REMPLAÇABLE. Lorsque cette dernière a atteint 90% de sa durée de vie, le TMOIN LUMINEUX INDICATEUR DE REMPLACEMENT DE LA LAMPE FLASH clignotera sur le PANNEAU DE COMMANDE avertissant que l'ampoule devra être remplacée prochainement.

Lorsque les 750 impulsions de la LAMPE FLASH REMPLAÇABLE ont été émises, le TMOIN LUMINEUX INDICATEUR DE REMPLACEMENT DE LA LAMPE FLASH utilisée à 100% s'allumera vous avertissant qu'aucune autre impulsion ne peut être émise. Pour continuer votre épilation, vous devez remplacer la LAMPE FLASH REMPLAÇABLE.



Remarque : Une LAMPE FLASH doit aussi être remplacée si de grandes taches apparaissent à l'intérieur ou si sa lentille est cassée.

Pour changer la LAMPE FLASH REMPLAÇABLE :

1. Appuyez sur l'INTERRUPTEUR de votre épilateur HPL.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise au mur.
3. Saisissez la LAMPE FLASH utilisée des deux côtés, tirez-la pour la faire sortir de la douille et jetez-la avec vos ordures ménagères.
4. Déballez une nouvelle LAMPE FLASH REMPLAÇABLE.
5. Insérez la nouvelle LAMPE FLASH en la poussant doucement en place.

Si elle est correctement positionnée, la LAMPE FLASH REMPLAÇABLE s'insérera facilement en place en la poussant et en la relâchant.



12. Dépannage

12.1. Mon épilateur HPL ne démarre pas

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à votre épilateur HPL.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché à une prise murale.

12.2. Il n'y a pas d'impulsion lorsque j'appuie sur le déclencheur

Assurez-vous d'avoir un bon contact avec la peau et que l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR y adhère fermement et pleinement. Pour votre sécurité, le déclencheur sera en mesure de libérer une impulsion uniquement si l'EMBOUT est fermement pressé contre la peau.

- Vérifiez le PANNEAU DE COMMANDE. Si le TMOIN LUMINEUX de la couleur de peau clignote pendant 3 secondes, l'appareil vous avertit que la couleur de peau a été évaluée trop foncée par le capteur détecteur de couleur pour une application sécuritaire. Essayez d'utiliser l'appareil sur une autre région.
- Vérifiez le TMOIN LUMINEUX INDICATEUR DE REMPLACEMENT DE LA LAMPE FLASH. Si il est allumé, débranchez votre appareil et changez la LAMPE FLASH.
- Assurez-vous que le TMOIN LUMINEUX INDICATEUR READY est allumé.
 - Si au bout de 10 secondes, le TMOIN LUMINEUX INDICATEUR READY reste éteint, éteignez et rallumez votre épilateur HPL, en appuyant sur l'INTERRUPTEUR ON/OFF, deux fois.
 - Si le problème persiste, contactez le service client BaByliss de votre région.
- Vérifiez le TMOIN LUMINEUX INDICATEUR DE FONCTIONNEMENT de l'appareil.
 - Si il est allumé, éteignez et rallumez deux fois votre épilateur HPL à l'aide de l'INTERRUPTEUR ON/OFF.
 - Si le problème persiste, contactez le service client BaByliss de votre région.

Si ces problèmes persistent, contactez le service client BaByliss de votre région.



N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre épilateur HPL. Seuls les centres de réparation agréés sont habilités à effectuer des réparations.

Ouvrir votre épilateur HPL vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.

Ouvrir votre épilateur HPL comporte des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie.

Veillez contacter le service client BaByliss si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

13. Service Client

Pour plus d'informations sur les produits HPL, veuillez visiter www.babylliss.com

Si votre dispositif est cassé, endommagé, nécessite une réparation ou que vous avez besoin de n'importe quelle aide, veuillez contacter le service client de BaByliss.

14. Foire aux questions

1. L'épilateur HPL est-il vraiment efficace ?

Oui. Les tests cliniques menés par des médecins ont prouvé que l'épilateur HPL BaByliss permettait d'obtenir des résultats permanents en toute sécurité.

2. Sur quelles parties du corps puis-je utiliser l'épilateur HPL ?

L'appareil HPL BaByliss a été conçu pour l'épilation complète des poils corporels. Les zones les plus communément traitées par l'épilateur HPL BaByliss sont: les jambes, les aisselles, les bras, la ligne du maillot et le visage.

3. Combien de temps dure une séance d'épilation avec l'épilateur HPL ?

La durée du traitement dépend de la zone à traiter. Une jambe entière peut demander 30 minutes et les deux aisselles, 10 minutes. L'épilateur HPL BaByliss fonctionne sur secteur et peut également s'utiliser aussi longtemps que nécessaire pour traiter la zone désirée.

4. L'épilateur HPL est-il sécuritaire ?

Votre sécurité était notre priorité lorsque nous avons conçu l'épilateur HPL. Il a été testé et approuvé par les meilleurs dermatologues et chirurgiens esthétiques afin de répondre à leurs critères de sécurité pour un appareil à domicile. Mais comme tout appareil électronique en contact avec la peau, l'utilisateur doit suivre les instructions et respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.

5. Les traitements par l'épilateur HPL sont-ils douloureux ?

Avec une utilisation convenable, la plupart des utilisatrices de l'épilateur HPL rapportent une légère sensation de chaleur au moment de l'impulsion de lumière. Les utilisatrices ayant des poils plus foncés et plus épais ressentent un peu plus d'inconfort. Mais ces sensations se calment et disparaissent à la fin de la séance. Pour votre confort, l'épilateur HPL offre 5 niveaux de puissance selon votre sensibilité.

6. À quelle fréquence dois-je utiliser l'épilateur HPL ?

Les 3 ou 4 premières séances avec l'épilateur HPL doivent être espacées de 2 semaines. Les séances 5 à 7 doivent être espacées de 4 semaines. Ensuite, les séances se feront à la repousse des poils jusqu'à obtention des résultats souhaités.

7. L'épilateur HPL est-il efficace sur des poils blancs, gris ou blonds ?

L'épilateur HPL est plus efficace sur des poils foncés ou sur ceux contenant plus de mélanine. La mélanine, le pigment qui donne sa couleur à la peau et aux cheveux, absorbe l'énergie optique. Les poils noirs et brun foncé répondent le mieux au traitement. Si les poils bruns et brun clair y répondent également, ces derniers nécessiteront un plus grand nombre de séances. Les poils roux peuvent également répondre partiellement au traitement. En général, les poils blancs, gris et blonds ne répondent pas au traitement, mais quelques utilisatrices ont noté des résultats après plusieurs séances d'épilation.

8. Puis-je utiliser l'épilateur HPL sur une peau brune ou noire ?

N'utilisez pas l'appareil sur une peau naturellement foncée! L'épilateur HPL élimine les poils en visant le pigment pileux. Des pigments se trouvent également dans les tissus dermiques environnants en quantité variée. La quantité de pigments dans le derme d'une personne visible par sa couleur de peau, permet de définir le niveau de risque auquel elle s'expose en utilisant l'épilateur HPL. Traiter une peau foncée avec l'épilateur HPL peut comporter des risques, comme des brûlures, des cloques et un changement de couleur de peau (hyper- ou hypopigmentation). Un procédé exclusif de sécurité, un capteur détecteur de couleur de peau, a été conçu sur l'épilateur HPL pour vérifier la couleur de la peau au début de chaque séance et à l'occasion pendant la séance en cours. Lorsque l'appareil détecte une zone plus foncée, le capteur désactive l'épilateur HPL qui ne plus émettre d'impulsion.

9. Quand obtiendrai-je les premiers résultats avec l'épilateur HPL BaByliss ?

Comme avec toute autre méthode d'épilation laser ou de photoépilation, les résultats ne sont pas immédiats; vous pourrez même avoir l'impression que rien ne s'est produit. Le poil donnera parfois l'impression de continuer à pousser après une séance, mais après deux semaines, la plupart de ces poils tomberont tout simplement. De plus, la pousse du poil se fait en trois phases différentes et seuls les poils se trouvant dans la phase active sont affectés par l'épilateur HPL. C'est pourquoi il faut plusieurs séances avant d'obtenir le résultat escompté.

10. Un homme peut-il utiliser l'épilateur HPL ?

Bien que conçu spécialement pour les femmes, l'épilateur HPL peut convenir aux hommes. Cependant, les poils masculins, en particulier ceux du torse, nécessiteront un nombre plus important de séances pour obtenir les résultats souhaités.

11. Pourquoi des poils repoussent-ils dans la région que j'ai traitée la semaine dernière ?

Il est assez commun que les poils donnent l'impression de continuer à pousser durant une à deux semaines après une séance d'épilation avec l'épilateur HPL. Ce processus est appelé « éjection ». Après deux semaines, vous constaterez toutefois que ces poils tombent ou se détachent de leur follicule. Cela dit, nous ne vous recommandons pas de tirer sur les poils pour qu'ils se détachent – laissez-les tomber naturellement. De plus, certains poils n'auront pas été affectés par l'épilateur HPL soit à cause d'une mauvaise application ou du fait que les poils étaient dans une phase de repos. Ces poils seront traités lors des séances suivantes, d'où la nécessité de recourir à plusieurs séances pour obtenir l'effet escompté avec l'épilateur HPL.

12. J'ai entendu dire que certains poils repoussaient plus clairs et plus fins après une photoépilation ?

Ce phénomène est bien documenté par les esthéticiennes et les médecins qui utilisent les appareils à laser ou à la lumière pulsée pour les traitements d'épilation. Il est possible que certains poils repoussent plus clairs et plus fins après une épilation avec l'épilateur HPL. En général, ces poils ne représentent qu'une infime partie de la pilosité originale, il faut donc continuer les traitements pour obtenir le résultat que vous souhaitez.

13. L'utilisation à long terme de l'épilateur HPL est-elle dangereuse pour ma peau?

L'utilisation du laser et de la lumière pulsée en médecine esthétique a été fortement documentée ces 15 dernières années dans des revues professionnelles et par des institutions respectées comme la clinique Mayo. Ces revues et institutions n'ont pas rapporté d'effets secondaires ou de blessures liés à l'usage à long terme d'appareils à laser ou à lumière pulsée.

14. Puis-je utiliser l'épilateur HPL pour éliminer les poils du menton ou du visage ?

L'épilateur BaByliss HPL peut être utilisé pour le traitement de la pilosité faciale de la joue vers le bas. Vous devez faire très attention et éviter le contours des yeux lors de l'application sur le visage. N'utilisez jamais l'épilateur BaByliss HPL autour ou à proximité des yeux. Vous devez éviter l'exposition au soleil avant et après les traitements avec l'épilateur BaByliss HPL quelle que soit la partie du corps qui est traitée. Vous devez utiliser une protection convenable, comme un vêtement couvrant ou une crème solaire (dont l'indice de protection est supérieur à 50), qui devra être utilisée régulièrement 3 semaines avant et après le traitement.

15. Combien de temps dois-je attendre avant d'utiliser l'épilateur HPL si je ne me suis pas protégée des rayons du soleil?

On devrait attendre 4 semaines avant d'utiliser l'épilateur HPL si vous vous êtes exposée au soleil sans protection. Si vous avez le moindre doute concernant l'exposition au soleil, consultez votre médecin ou contactez le service client de BaByliss.

16. Que dois-je faire avant d'utiliser l'épilateur HPL ?

Avant chaque séance avec l'épilateur HPL, il est important de ne pas exposer au soleil la zone à traiter pendant au moins quatre semaines. Un écran solaire à indice élevé (indice de protection 50+) pourrait vous aider; ainsi que des vêtements qui couvrent la zone à traiter. De plus, la zone à traiter doit être préalablement lavée à l'eau et au savon et les poils fraîchement rasés.

17. Comment m'occuper de la zone traitée après l'utilisation de l'épilateur HPL ?

La zone traitée avec l'épilateur HPL peut être nettoyée et entretenue avec des produits reconnus pour les soins de la peau. Des précautions particulières sont à prendre afin d'éviter une exposition non protégée au soleil. Des écrans solaires à indice élevé (indice de protection 50+) et des vêtements longs constituent une bonne protection contre le soleil.

18. Dois-je épiler les poils après le traitement?

Non, laissez les poils tomber graduellement d'eux-mêmes. Cette étape peut durer jusqu'à deux semaines.

15. Spécifications

Point d'impact Specs	2 cm x 3 cm [6 cm ²]	
Vitesse	1 impulsion toutes les 3 secondes et demie : 1,7 cm ² / sec	
Technologie	Home Pulsed Light™	
Puissance maximale	Max 5 J / cm ²	
Longueur d'onde	475 - 1200 nm	
Temps de charge / Source d'énergie	Fonctionnement continu	
Installation électrique requise	100 - 240 VAC, 2A	
Temps nécessaire pour le traitement des demi-jambes	30 minutes	
Maniement et sécurité	Nouveauté : un capteur détecteur de couleur assure une utilisation sécuritaire. L'embout du capteur permet un maximum de contrôle et de sécurité. Facile à manier.	
Dimensions de l'emballage	22 cm x 22 cm x 13 cm	
Température	Fonctionnement	10 à 40°C
	Stockage	-40 à +70°C
Humidité relative	Fonctionnement	30 à 75%
	Stockage	10 à 90%
Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 à 1060hPa
	Stockage	500 à 1060hPa

16. Emballage

♻️ (DEEE) – Déchets d'équipement électrique et électronique

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou avec de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

G900E

www.babyliss.com