

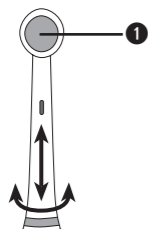


(F)

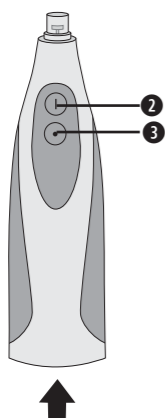

**Brosse à dents de voyage
KH120**

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez-lui également le mode d'emploi.

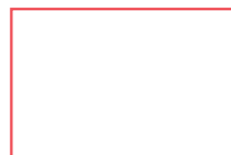


Caractéristiques techniques
Alimentation électrique : 2 piles 1,5 V de type AA/LR6
Classe de protection : IPX4

Finalité de la machine
Cet appareil a été conçu pour assurer l'hygiène dentaire personnelle et ne peut être destiné qu'à un usage privé. Il n'est pas conçu pour une utilisation commerciale, industrielle ou médicale ni pour les soins aux animaux.

Accessoires fournis
Brosse à dents électrique
1 brosse
1 étui de transport pour brosse
2 piles 1,5 V de type AA/LR6
1 boîte de rangement
Bon de commande pour brosses de rechange
Manuel d'instruction

Description de l'appareil

- 1 Brosse
- 2 Bouton de mise en marche
- 3 Bouton d'arrêt
- 4 Evidement
- 5 Cache de compartiment à piles

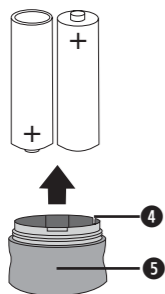

Piles

- Retirez le cache batterie 5 vers le bas.
- Retirez le film protecteur des contacts.
- Vérifiez si les batteries ont été introduites en respectant la polarité correcte.
- Refermez ensuite entièrement la cache du compartiment à piles 5.

Veillez à ce que l'évidement 4 s'enclenche au niveau du cache du compartiment de piles 5 dans la glissière à l'intérieur de la brosse à dents.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps et utilisez toujours des piles identiques. En cas de fuite des piles, il est nécessaire de porter des gants de protection. Nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon sec.

Brossage des dents

- Enlever l'étui de protection de la brosse.
- Appliquer une légère quantité de pâte dentifrice sur la brosse humide.
- Toutefois, attendre que l'appareil soit dans la bouche pour éviter toute éclaboussure.
- Ensuite, appuyer sur le bouton de mise en marche 2.
- Brossez dans un premier temps la face extérieure de vos dents. Poser la brosse 1 sur la gencive et la déplacer sur la dent en partant de la gencive.

- Pour chaque dent, recommencer à nouveau au niveau de la gencive.
- Nettoyer la face intérieure de vos dents en employant la même technique.
- Pour nettoyer la surface de mastication, déplacer la brosse rotative sur la surface de mastication en exerçant une légère pression.
- Nettoyer ensuite soigneusement la face arrière des arrière-molaires.

- Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton d'arrêt 3.

Cet appareil dispose d'un minuteur de deux minutes. Après env. deux minutes, l'appareil ralentit et vous indique ainsi que vous avez satisfait à la recommandation des dentistes de brosser pendant deux minutes.

Attention : Il se peut qu'au début vos gencives saignent légèrement ; ce phénomène s'explique par le frottement inhabituel auquel elles viennent d'être soumises et est tout à fait normal.

Si elles continuent toutefois à saigner au bout de deux semaines d'utilisation de la brosse, demander conseil à un dentiste.

Montage/enlèvement de la brosse

- Vous pouvez retirer la brosse 1 vers le haut en la faisant tourner.
- Pour monter la brosse 1, effectuer les étapes dans l'ordre inverse.

La brosse 1 doit s'enclencher lors de du montage. Il est recommandé d'utiliser exclusivement des brosses d'origine pour éviter tout dommages (voir le bon de commande pour les brosses de rechange).

Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, nettoyer soigneusement la brosse en la passant sous l'eau courante. Pour des questions d'hygiène, nous recommandons de procéder toutes les 2 à 4 semaines à un nettoyage de la brosse à l'aide d'un produit de nettoyage pour prothèses disponible dans le commerce.

Mise au rebut

Surtout, ne pas éliminer l'appareil avec les ordures ménagères normales.

Éliminer l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune.

Veillez respecter les règlements actuellement en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.

Piles

Les piles peuvent contenir des substances toxiques dangereuses pour l'environnement. Par conséquent, les piles doivent être mises au rebut dans le respect de la législation en vigueur. Les piles ne doivent jamais être jetées dans la poubelle domestique normale.

Éliminez l'ensemble des matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement.

Garantie

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat. L'appareil a été fabriqué avec soin et consciencieusement contrôlé avant sa distribution. Veuillez conserver le ticket de caisse en guise de preuve d'achat. Dans le cas où la garantie s'applique, veuillez appeler le service après-vente compétent. Cette condition doit être respectée pour assurer l'expédition gratuite de votre marchandise.

Cette garantie s'applique uniquement pour les vices de matériaux et de fabrication, et ne couvre pas les éléments d'usure ou pour les dommages subis par des éléments fragiles, par ex. le commutateur ou les piles. Le produit est uniquement destiné à un usage privé, à l'exclusion de tout usage professionnel. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation non conforme ou inappropriée, d'utilisation violente ou de toute intervention qui ne serait pas effectuée par notre service après-vente autorisé. Cette garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux. Seul l'acheteur d'origine est couvert par la présente garantie qui n'est pas transmissible.

(F) Kompernass Service France

Tel.: 0800 808 825
e-mail: support.fr@kompernass.com

TRONIC®

KH120

(FR) Brosse à dents de voyage

- idéal pour les déplacements
- piles incluses



(NL) Reistandenborstel

- ideaal voor onderweg
- inclusief batterijen

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH120-04/06-V3



(NL)

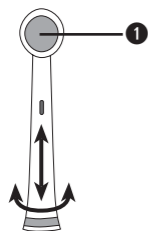
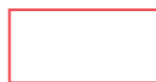


Reistandenborstel KH120

Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat van de hand doet, geef dan ook de handleiding mee.

Technische gegevens

Stroomvoorziening : 2x 1,5 V type AA/LR6 batterijen
Beveiligingsklasse : IPX4

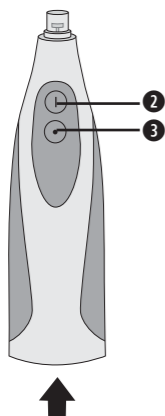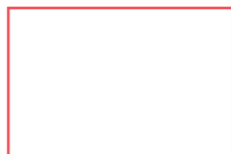


Gebruiksdoel

Dit apparaat is bestemd voor persoonlijke tandverzorging en is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Het is niet bestemd voor gebruik in bedrijfsmatige, industriële of medische omgevingen en ook niet voor dierverzorging.

Inhoud van de verpakking

Elektrische tandenborstel
1 borstelkop
1 transportbeveiliging borstelkop
2x 1,5 V type AA/LR6 batterijen
1 opbergbox
Bestelformulier voor vervangende borstelkoppen
Gebruiksaanwijzing

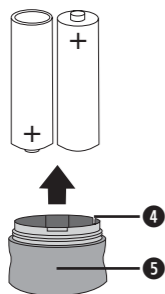

Apparaatbeschrijving

- 1 borstelkop
- 2 aan-knop
- 3 uit-knop
- 4 uitsparing
- 5 afdekplaatje batterijvak



Batterijen

- Trek het plaatje van het batterijvak 5 omlaag om het te verwijderen.
- Verwijder de beschermingsfolie van de contacten.
- Controleer of de batterijen met de juiste stand van de polen zijn geplaatst.
- Plaats vervolgens het klepje van het batterijvak 5 terug en druk tot het volledig vastklikt.

Let erop dat de uitsparing 4 op het klepje van het batterijvak 5 in de geleidingsopening van de tandenborstel moet grijpen.

Vervang altijd alle batterijen tegelijk en gebruik altijd batterijen van hetzelfde type. Trek in geval van lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak met een droge doek.

Tanden poetsen

- Verwijder de transportbeveiliging van de borstelkop.
- Breng een beetje tandpasta aan op de vochtige borstelkop.
- Zet het apparaat pas in de mond aan om te voorkomen dat de tandpasta in het rond sproeit.
- Druk hiervoor op de aan-knop 2.
- Poets eerst de buitenkant van uw tanden.

Houd de borstelkop 1 tegen het tandvlees en beweeg de borstel vanaf het tandvlees over de tand.

- Plaats de borstel voor elke tand opnieuw op het tandvlees.
- Maak de binnenkant van uw tanden op deze wijze schoon.
- Om de kauwvlakken schoon te maken, beweegt u de roterende borstel met lichte druk over de kauwvlakken.

- Maak daarna de achterkant van de achterste kiezen grondig schoon.
 - Om de tandenborstel uit te schakelen, drukt u op de uit-knop 3.
- Dit apparaat heeft een timer van ca. 2 minuten. Na twee minuten gaat het apparaat langzamer draaien, zodat u weet dat de door tandartsen aanbevolen poetstijd van 2 minuten is bereikt.

Waarschuwing: in het begin kan het door de ongewone irritatie tot bloedend tandvlees komen, dat is normaal. Indien dit langer dan twee weken duurt moet u advies inwinnen bij uw tandarts.

Borstelkop opzetten / afnemen

- U kunt de borstelkop 1 afnemen door deze omhoog te draaien.
- Om de borstelkop 1 op te zetten, gaat u in de omgekeerde volgorde te werk.

De borstelkop 1 moet bij het opzetten vastklikken. Gebruik uitsluitend originele borstelkoppen, om beschadiging te voorkomen. (Zie de bestelkaart voor vervangende borstelkoppen.)


Reiniging en onderhoud
Maak de borstelkop na gebruik grondig schoon onder stromend water. Vanuit hygiënisch oogpunt adviseren wij om de borstelkop om de 2-4 weken schoon te maken met een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel voor prothesen.

Milieurichtlijnen



Voer het toestel af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Neem de bestaande voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst.

Batterijen
Batterijen kunnen giftige stoffen bevatten, die schadelijk zijn voor het milieu. Ontdoe u daarom altijd van de batterijen in overeenstemming met de bestaande wettelijke bepalingen. Deponeer de batterijen in geen geval bij het normale huisvuil.

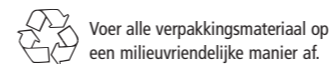

Garantie

U heeft op dit apparaat 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b. de kassabon als aankoopbewijs. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd.

De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, niet voor aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. schakelaars of accu's. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij ingrepen die niet worden uitgevoerd door ons geautoriseerde servicefiliaal, vervalt de garantie. Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet ingeperkt. Deze garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper en is niet overdraagbaar.

© I.T.S.w. bv
Papierbaan 55 · 9672 BG Winschoten
Tel.: 0900/8724357
Fax: 0597/420632
e-mail: support.nl@kompennass.com
Verzendadres: Antwoordnummer 300
9670 WB Winschoten



TRONIC

