

**Lettore testi Plustek V100**

**Guida dell'utente**

## **Marchi registrati**

© 2007 Plustek Inc. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta senza autorizzazione. Tutte i marchi registrati e le marche citate in questa pubblicazione sono proprietà dei rispettivi proprietari.

## **Responsabilità**

Sebbene ci siano impegnati per assicurare l'accuratezza di tutti i contenuti di questo manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori, omissioni o dichiarazioni di alcun tipo contenute nel manuale, sia che tali errori siano omissioni o dichiarazioni provocate da negligenza, incidente o qualsiasi altra causa. I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## **Diritti d'autore**

La scansione di alcuni documenti, ad esempio assegni, estratti conto bancari, carte d'identità, titoli di stato o documenti pubblici, potrebbe essere vietata dalla legge e/o costituire reato punibile da azione penale. Si raccomanda di essere responsabili e di rispettare i diritti d'autore quando si eseguono scansioni di libri, riviste, giornali ed altri materiali.

## **Informazioni ambientali**


Questo prodotto è progettato e prodotto per ottenere un notevole miglioramento ecologico. Ci siamo impegnati a produrre prodotti conformi agli standard ecologici mondiali. Consultare le autorità locali per lo smaltimento appropriato del prodotto. Gli imballaggi del prodotto sono riciclabili.

## **Schermate esemplificative di questo manuale**

Le schermate di questa guida sono state acquisite da Windows XP. Se si usa Windows 2000, lo schermo apparirà leggermente diverso, però le funzioni sono le stesse.

### **Che cosa contiene la confezione?**


1. Lettore testi.
2. Cavo USB.
3. Adattatore di corrente.
4. Guida rapida.
5. Confezione CD: un CD-ROM applicazione ed un CD-ROM audio.

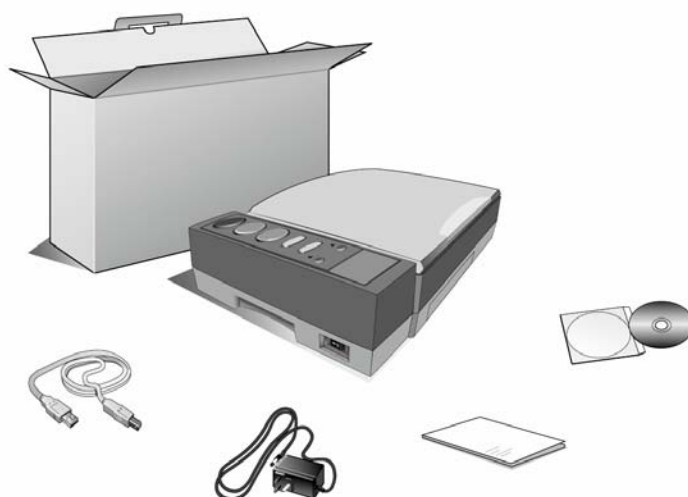

**Prima di collegare il Lettore testi al computer, assicurarsi – per prima cosa – di sbloccare il Lettore.**


### **Come si sblocca il Lettore testi?**

**Basta estrarre la serratura sulla parte inferiore del lettore; assicurarsi sempre che il Lettore sia collocato su una superficie solida e piatta.**

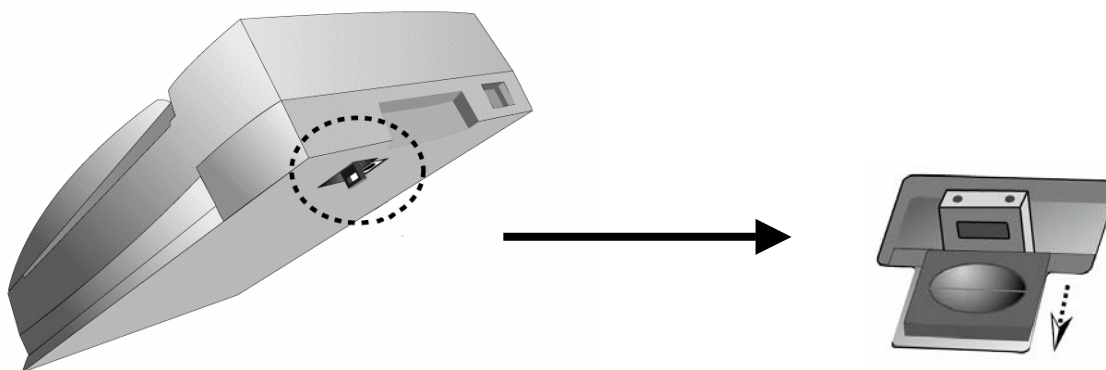


### **Come si collega il Lettore testi al computer?**

1. Inserire l'adattatore di corrente al connettore d'alimentazione del Lettore testi.
2. Inserire l'altra estremità dell'adattatore ad una presa di corrente standard CA.
3. Inserire l'estremità quadrata del cavo USB fornito in dotazione, nella porta USB sulla parte posteriore del Lettore testi.
4. Inserire l'estremità quadrata del cavo USB in una porta USB disponibile sul retro del computer.
5. Se si progetta di collegare il Lettore testi ad un Hub USB, assicurarsi che l'Hub sia collegato alla porta USB del computer. Quindi, collegare il Lettore testi all'Hub USB.

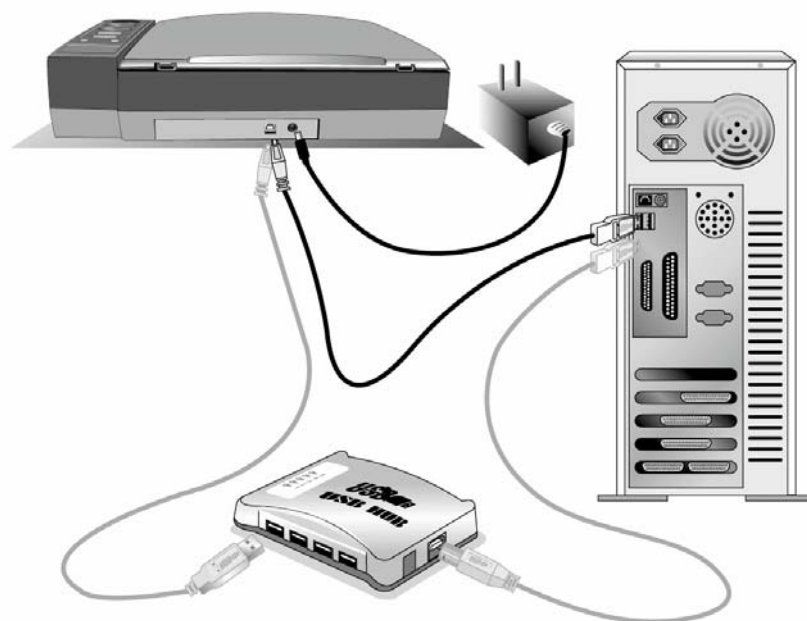

## **Come si installa il software Plustek BookReader?**

1. Accendere il Lettore testi.
2. Inserire il CD-ROM BookReader nell'unità CD-ROM.
3. Il CD-ROM eseguirà automaticamente l'installazione.
4. Al termine dell'installazione sarà annunciato il seguente messaggio audio "the installation has completed, the system will restart" (L'installazione è stata completata, il sistema si riavvierà).
5. Il computer sarà riavviato e l'installazione sarà completata.

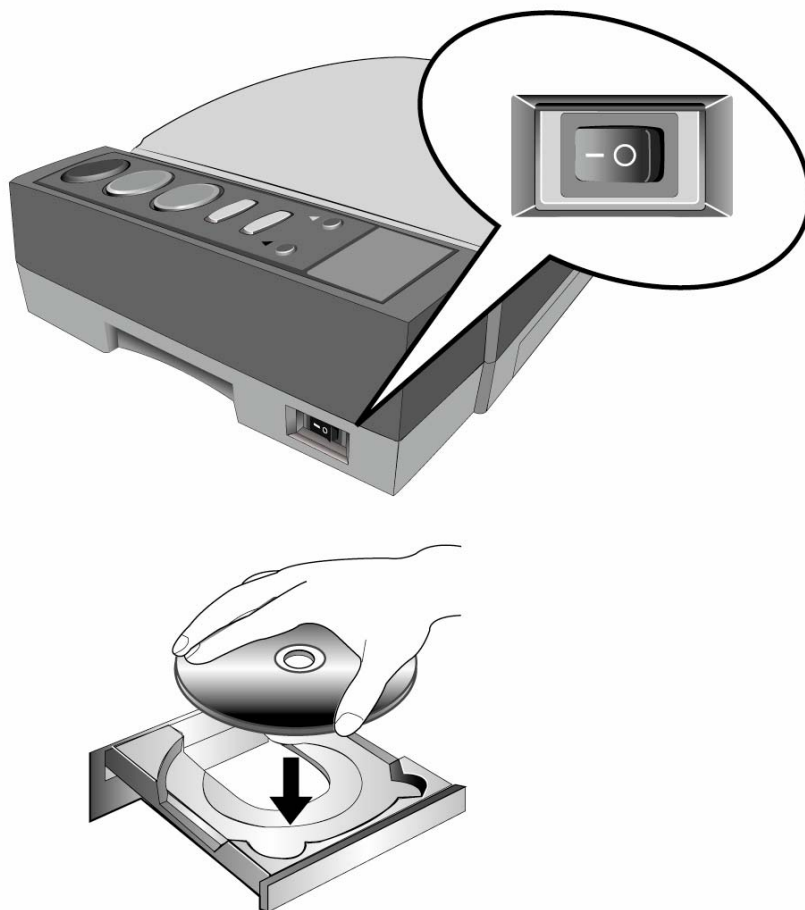

## Istruzioni sui tasti del Lettore testi Plustek


Il Lettore testi Plustek possiede tre tasti Braille e ciascuno dei tasti è stato progettato per uno scopo diverso.

**Tasto Braille a :** è progettato per eseguire la scansione di documenti in formato di testo; sullo schermo è visualizzato solo il testo. I documenti digitalizzati possono essere salvati in file di formato TXT, RTF e PDF. Questo tasto è adatto alla scansione di pagine singole o di lettere.

**Tasto Braille b :** è progettato per eseguire la scansione di documenti in un file immagine PDF; sullo schermo sono visualizzate le immagini ed il testo insieme. I documenti digitalizzati possono essere salvati solo in file di formato PDF. I risultati di scansione di questo tasto visualizzeranno il formato originale della pagina digitalizzata.


**Tasto Braille c :** è progettato per eseguire la scansione di documenti in formato PDF. Sullo schermo è visualizzato solo il testo PDF. Questo tasto è adatto alla scansione di più pagine.

Gli altri tasti del pannello sono per usi futuri, ed attualmente non hanno alcuna funzionalità.

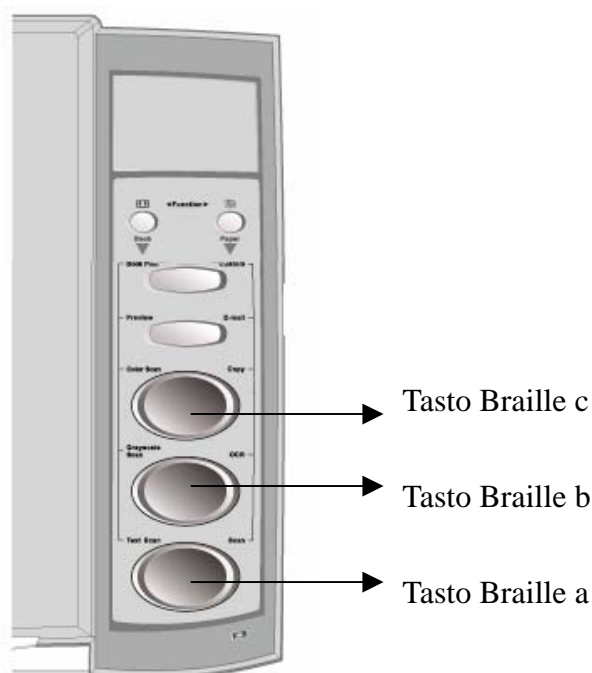

### **Come si usa il Lettore testi Plustek?**

1. Aprire il coperchio del Lettore testi e collocare un libro sul vetro con la parte superiore della pagina rivolta verso il pannello dei tasti del Lettore.
2. Poi, chiudere il coperchio con delicatezza.
3. Premere il tasto della funzione voluta sul pannello del Lettore; la scansione della pagina si avvierà. Durante la scansione, il Lettore enuncerà il testo.
4. Si prega di non premere di nuovo il tasto durante la procedura di scansione della pagina.

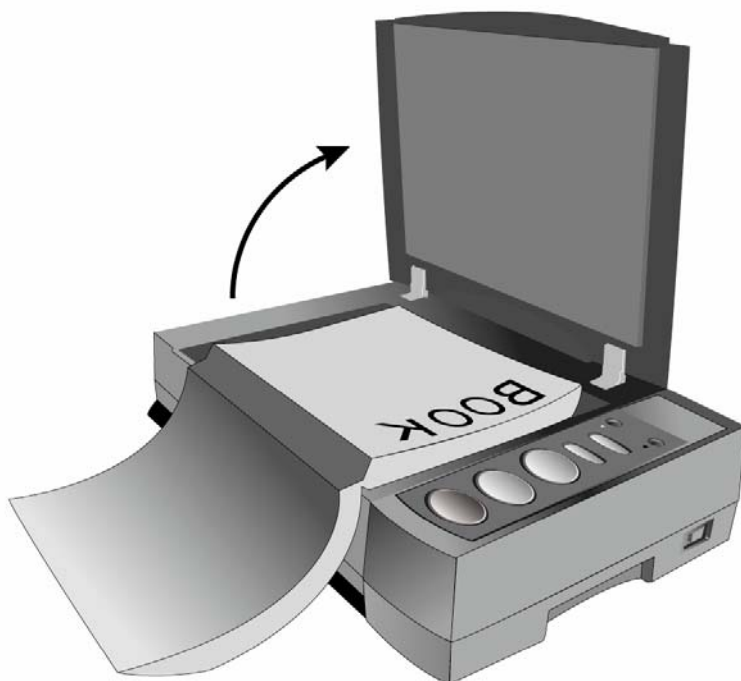

## **Tasti di scelta del Lettore testi Plustek**

**F1:** funzione Esegui, Pausa e Riprendi.

**F2:** funzione Ingrandimento testo.

**F3:** funzione Zoom indietro.

**F4 :** funzione Zoom originale.

**F5:** funzione Zoom avanti.

**F6:** per cambiare il colore dello sfondo e dei caratteri.

**F7:** per scambiare il colore dello sfondo e dei caratteri.

**F8:** funzione Ingrandimento.

**F9:** funzione di lettura lenta.

**F10:** funzione di lettura rapida.

**F11:** funzione caratteri piccoli.

**F12:** funzione caratteri grandi.

**Tasto Ctrl e freccia sinistra:** funzione Indietro.

**Tasto Ctrl e freccia destra:** funzione Avanti.

**Tasto Ctrl e freccia su:** funzione Volume su.

**Tasto Ctrl e freccia giù:** funzione Volume giù.

**Tasto Esc:** per ricominciare a leggere l'intera pagina.

**Tasto Ctrl e 1:** per ripetere la parola.

**Tasto Ctrl e 2:** per ripetere la frase.

**Tasto Ctrl e 3:** per ripetere la pagina.

**Tasto Ctrl e 4:** per ripetere il file.

Attenersi alle istruzioni che seguono per usare la barra degli strumenti: (Operazioni standard del sistema Microsoft Office)

**Tasto Alt e F:** per aprire il menu File.

**Tasto Alt ed E:** per aprire il menu Edit (Modifica).

**Tasto Alt e S:** per aprire il menu Speech (Strumenti vocali).

**Tasto Alt e T:** per aprire il menu Formate (Formato).

**Tasto Alt e V:** per aprire il menu View (Visualizza).

**Tasto Alt e W:** per aprire il menu Window (Finestra).

**Tasto Alt e H:** per aprire il menu Help (Guida).



## **Nota importante**

1. Il Lettore testi Plustek ha una funzione di “segnalibro automatico”. Quando si apre un file letto in precedenza, la lettura inizierà dal paragrafo dove è stata terminata la volta precedente.
2. Assicurarsi che lo schermo del lettore sia spento prima di usare il Lettore testi Plustek.
3. Prima di usare il Lettore testi Plustek, accertarsi che la linguetta del Lettore si muova liberamente per fare ciò impostare il lucchetto in posizione di sblocco estraendolo.
4. Assicurarsi sempre che il Lettore testi sia collocato su una superficie solida e piatta ogni volta che è in uso.
5. Ricordare di non premere di nuovo i tasti quando è in esecuzione la scansione di una pagina.
6. Per quanto riguarda gli aggiornamenti del software del Lettore testi, basta fare clic sull'icona HELP (Guida) e seguire le istruzioni per scaricare il software più aggiornato del Lettore testi Plustek. Per eseguire il download del software è necessaria la connessione ad Internet.
7. Perché la funzione Magnifier (Lente d'ingrandimento) funzioni in modo appropriato con Windows Vista, è necessario attenersi alle istruzioni che seguono:  
Fare clic col tasto destro del mouse sullo schermo e scegliere "personalize" (Personalizza).  
Scegliere "Window Color and Appearance". (Colori e Aspetto della finestra)  
Scegliere lo stile classico per altre opzioni colore  
Scegliere "Windows Vista Basic".  
Poi applicare le impostazioni.

## **Registrazione in linea**

Plustek suggerisce di registrare le informazioni personali direttamente sul nostro sito.

In seguito saremo in grado di informarvi sugli aggiornamenti del software del Lettore testi. Desideriamo condividere con voi anche le novità nel campo degli sviluppi del prodotto.

Vi preghiamo di visitare il nostro sito all'indirizzo: [www.mybookreader.com](http://www.mybookreader.com)